


Трефинационное сверло

- Сверло для удаления имплантата.
- Перед использованием проверьте, подходит ли размер к снимаемому имплантату.
- Обратным вращением сформируйте контур на поверхности кости, а затем просверлите его обычным вращением.
- Рекомендуемое число оборотов: 800-1200 ОБ/МИН

Арт. №	A	B
TPD-35	3,5	4,1
TPD-40	4,0	4,6
TPD-45	4,5	5,3
TPD-55	5,5	6,3

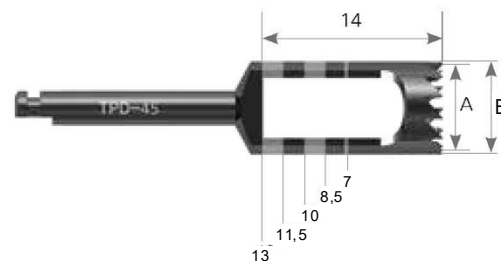

Подсоедините к наконечнику трефинационное сверло, соответствующее диаметру удаляемого имплантата. Обратным вращением сформируйте контур на поверхности кости.



Выполните обычное вращательное сверление до глубины имплантированного имплантата, чтобы отделить удаляемый имплантат от окружающей кости.

* Увеличьте количество орошения на столько, чтобы уменьшить нагрев костей.



Если имплантат сломался, затяните инструмент для снятия имплантата обратным вращением и снимите имплантат.