

WARANTEC

Powered by Aidite



WARANTEC — цифровое решение для имплантации при полной адентии

Создайте центр имплантации при полной адентии «за один день»

Aidite

Aidite (Qinhuangdao) Technology Co., Ltd.
Tel: +86-400-003-1233
Web: www.aidite.com
Email: info@aidite.com
V4-260331



www.warantec.com



www.aidite.com



Facebook

30 лет опыта — создаём премиальные протезы

Вы всё ещё сталкиваетесь со сложностями тотальных реставраций при полной адентии?

- ✗ Неконтролируемое время — потеря заказов и отток пациентов.
- ✗ Неконтролируемые процессы: невозможность пассивной посадки, проблемы окклюзии, повторные переделки.
- ✗ Неконтролируемые эмоции пациентов приводят к падению репутации клиники.

ONE DAY

Обзор решения

Что WARANTEC может сделать для вас?

Цифровое решение WARANTEC для полной адентии — это полностью цифровой протокол реставрации при тотальной имплантации.

Решение оптимизировано на основе обширной клинической практики, перестраивает логику сопоставления данных, эффективно упрощает протокол тотальной имплантации и обеспечивает замкнутый цикл «Имплантация сегодня · Реставрация сегодня».

Врач получает точную и контролируемую немедленную нагрузку при полной адентии: **ноль потерь пациентов** и **ноль переделок**.





Уникальная ценность

Высокая точность | Погрешность до **30–40 мкм**

- ✓ Погрешность всего протокола — в пределах 30–40 мкм, что отвечает порогу безопасности для немедленной нагрузки.

Высокая эффективность | **3 ч/челюсть**

- ✓ Только интраоральное сканирование, дизайн в облаке и печать высокопрочного временного моста одним кликом; в среднем операция и фиксация реставрации занимают 3 часа на челюсть.

Высокая прибыльность | Прибыль выше **в 2,8 раза**

- ✓ Отказ от традиционного аутсорсинга увеличивает прибыль в 2,8 раза.

Высокая конверсия | Согласие на лечение **+40%**

- ✓ Фиксация реставрации в день обращения повышает долю согласий на лечение на 40%. Временная реставрация служит до 6 месяцев, повышая удовлетворённость пациентов и число рекомендаций.

*Данные основаны на расчётах реальной клинической практики.



Сканирование до операции 20 мин

Цифровая отправная точка — точный захват 3D-данных полости рта.
Без традиционных оттисков: комфортнее для пациента и надёжная
основа для точного дизайна.



Эффективно
и комфортно



Точные данные



Бесшовное
подключение




① Создание случая



② Верхняя челюсть до операции



③ Нижняя челюсть до операции

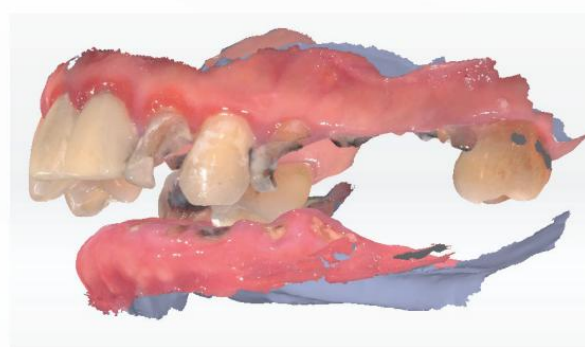

④ Оклюзия до операции





Навигационная хирургия 30–60 мин

Перенос цифрового дизайна в операционное поле одним кликом.
Хирургический шаблон — как GPS для точной установки имплантатов.



Точно и безопасно



Эффективно и предсказуемо



Проще сложные случаи



Хирургический набор WAGA

Имплантат IU





Сканирование при адентии 30 мин

Ядро точности решения! Сканбоди нового поколения WARANTEC точно фиксируют позиции имплантатов и трансмукозальный контур, обеспечивая идеальную «пассивную посадку» реставраций.




Революция точности



Идеальная пассивная посадка




Сканирование в один этап

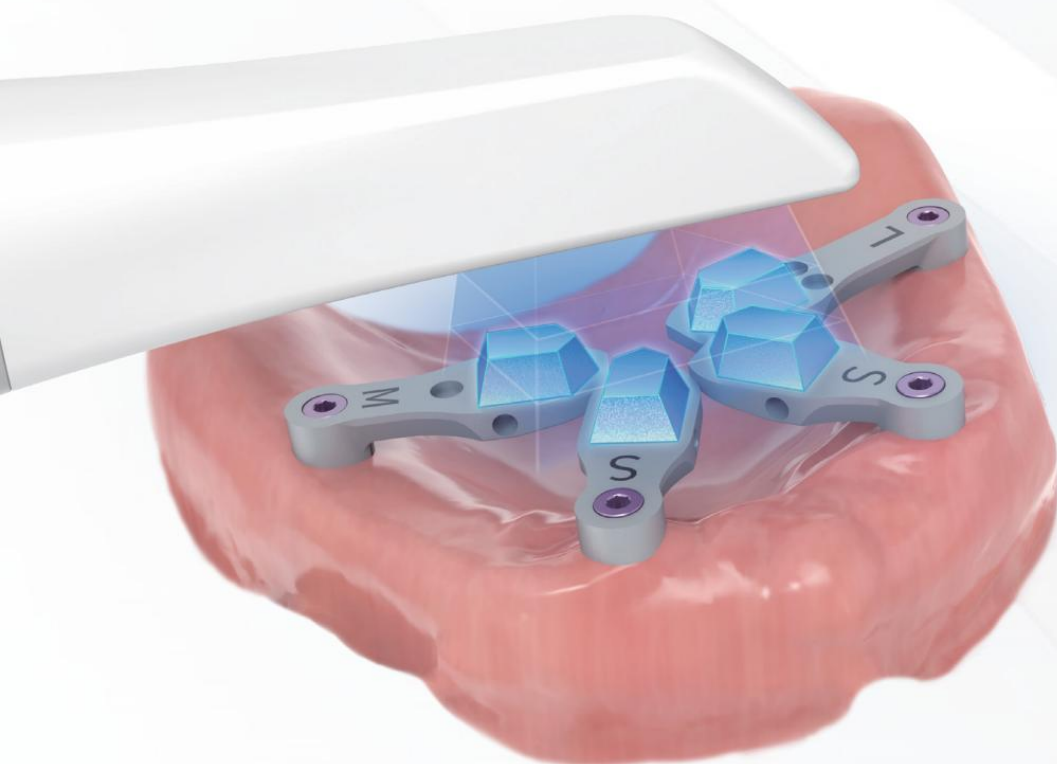


Премиальный материал — долговечность

Титановый сплав медицинского класса: стойкость к коррозии, высокая прочность, многократная стерилизация при высоких температурах, без ограничения числа использований.

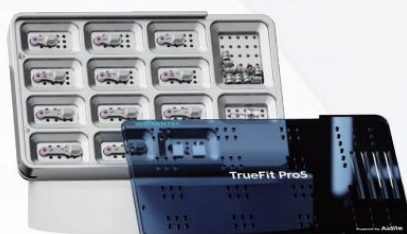

Малая зона сопоставления, высокая точность и бесшовная реставрация


Погрешность сшивки сканбоди — главная причина неточности при полной адентии. Поэтому сканбоди WARANTEC использует круговую зону сканирования, достигая более высокой точности при меньшем объёме данных.

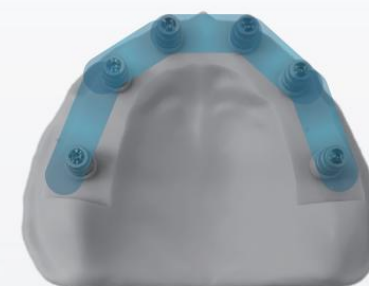

Зона сканирования традиционного сканбоди



Зона сканирования сканбоди WARANTEC

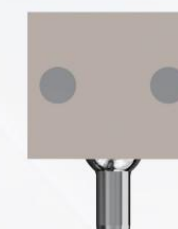

Коннектор сканбоди

Сканировочный колпачок фиксирует информацию о десневых тканях пациента и позициях имплантатов; высота колпачка H = 5,6 мм.



4,8 мм



Больше типоразмеров — больше возможностей

Несколько типоразмеров (S/M/L/X) решают клинические задачи — узкие зубные дуги, ограниченное открывание рта.



S

M

L

X



Совместимость с разными интраоральными сканерами






Облачная платформа и ПО 30 мин



Поддержка облачного сервиса

Aidite Cloud объединяет клиники, лаборатории и пациентов: дизайн коронок, виниров, имплантационных конструкций и др. Команда владеет Exocad и 3Shape: DSD, полные протезы, индивидуальные абатменты.

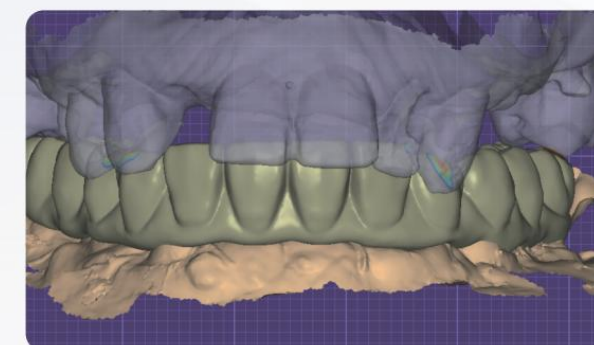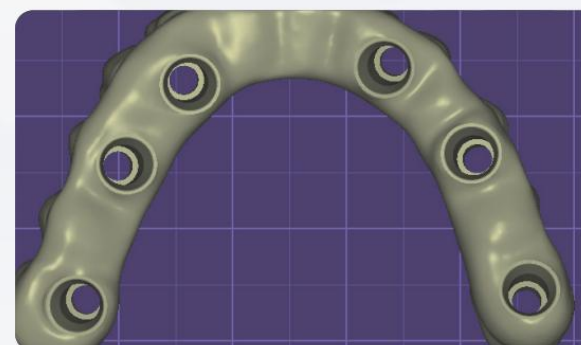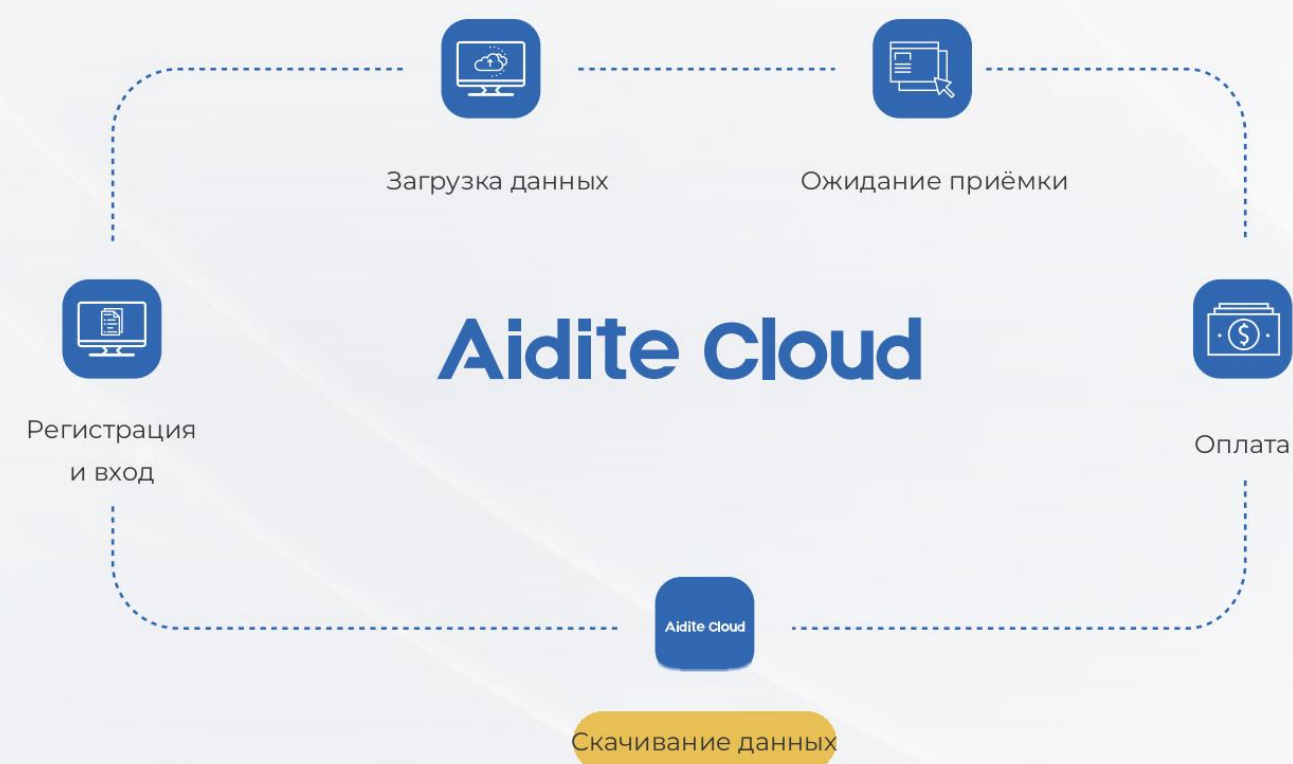



Временная реставрация 60 мин

Немедленная нагрузка в день операции! Высокоточные временные реставрации, напечатанные на 3D-принтере, сразу возвращают пациенту функцию и эстетику.



Зубы в тот же день



Быстро и эффективно



Форма и функция

1. Высокоточная быстрая печать — от **40 минут**, точность формования **30 мкм**, полировка не требуется.

2. **53%** керамики, модуль упругости 6400 МПа — высокая износостойкость, светопропускание **60%** — высокая эстетика, нагрузка на излом 3518 Н без разрушения.

3. Непрерывное мягкое давление на свободную десну направляет ремоделирование контура десневого края: симметричная эстетика и профилактика периимплантита.



Облачная передача и обмен данными



Создан для стоматологической 3D-печати

Пошаговый режим работы — легко освоить.

Печать модели в один клик

Автоматическая ориентация, раскладка, поддержки и полости зубных моделей — одним кликом.

От обработки до сохранения

Высокоскоростной слайсер.

Интеллектуальное выявление рисков

Проверка ошибок модели, закрытых полостей, коллизий и нависаний — для высокого процента успешной печати.





Постоянная реставрация

Финал цифрового протокола: постоянные реставрации изготавливаются по точным данным — отличная эстетика, функция и долговечность.



Индивидуальный дизайн



Отличная биосовместимость



Долговечность

Мост с винтовой фиксацией



- Высокая точность за счёт цельного изготовления
- Без металлического каркаса — нет серой линии у десны
- Простой сервис: единицы моста снимаются по отдельности
- Адгезия зубного налёта ниже на **60%**, что снижает риск периимплантита



Светопропускание

48%


Прочность

1300 МПа


Клинический случай



① Операция

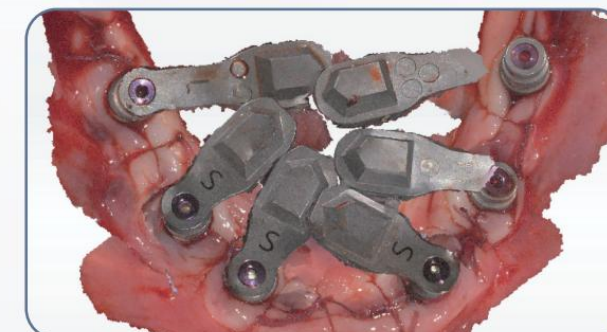

② Сканирование

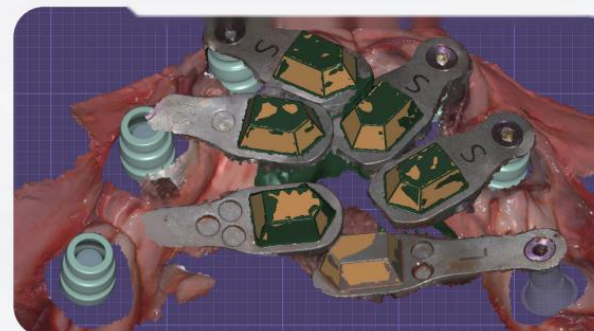


③ Совмещение и калибровка



④ Дизайн



⑤ 3D-печать

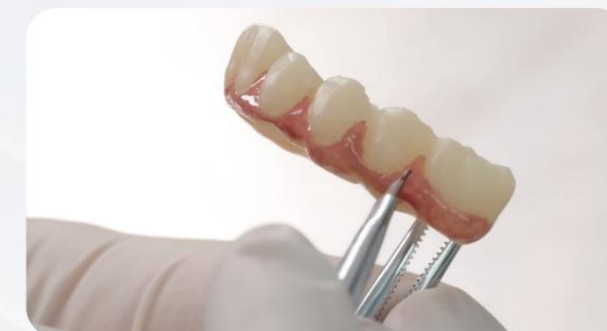

⑥ Постобработка



До операции



После операции

Контактная информация **+86-400-003-1233**

Сервисная поддержка

Следуя принципу эффективного сервиса и ориентируясь на клиентов, мы гарантируем быструю реакцию и решение вопросов в течение 24 часов.

Помогаем преодолевать трудности и сопровождаем вас на пути реставраций у кресла.

