

Aidite

Rapid 5

Интраоральный сканер

Точность · Лёгкость



Aidite

Aidite (Qinhuangdao) Technology Co.,Ltd.
Тел.: +86-400-003-1233
Сайт: www.aidite.com
Email: info@aidite.com
VI-250902



www.aidite.com





Facebook

Здоровая и красивая улыбка — каждому

Aidite Rapid 5

Точный и простой в использовании

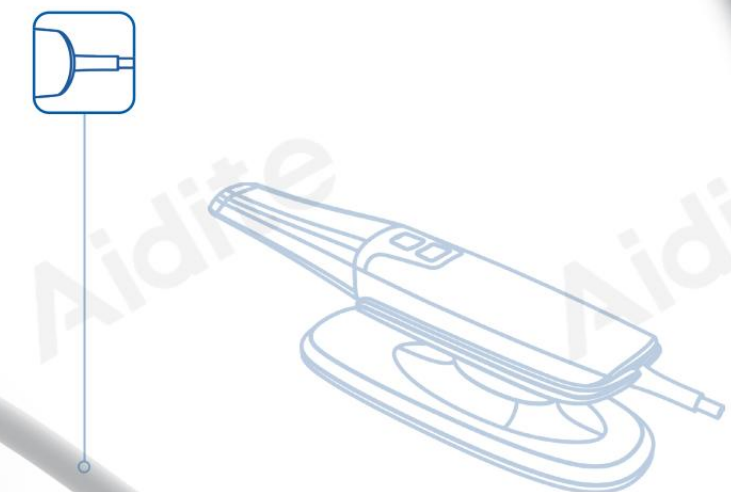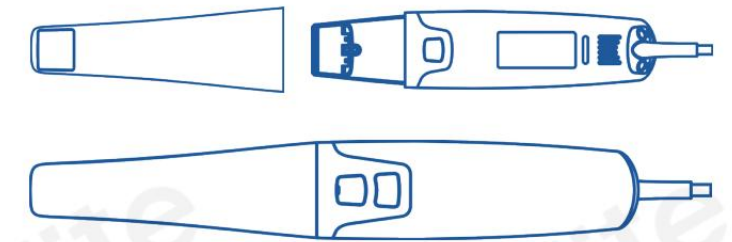

⚡ Быстрое сканирование

Функции ИИ-сканирования, высокоточная оптика, алгоритмы 3D-реконструкции и интеллектуальное сопоставление: сканирование половины зубной дуги — за 25 секунд, полной дуги — за 60 секунд.


📐 Проще процессы — выше эффективность

Корпус весом 162 г повышает манёвренность и снижает усталость руки. Подходит для любых углов сканирования и индивидуальных предпочтений врача.




Мгновенные HD-фото. Удобное сравнение

Съёмка цветных 2D-фото высокой чёткости прямо во время сканирования. Сравнение 3D-скана с реальными снимками поражений на одном экране — для точной диагностики.

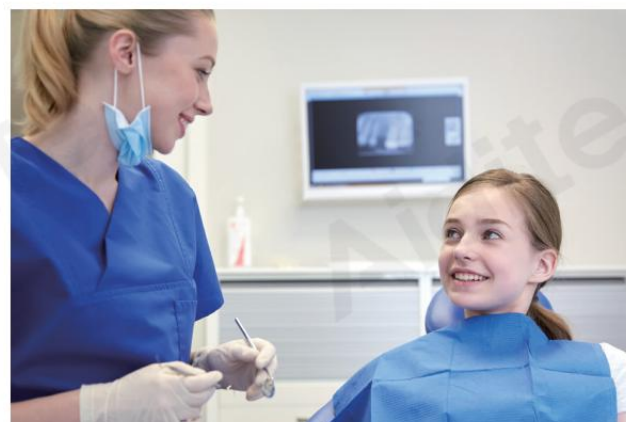


В один клик — создание и печать модели

Автоматическое создание оптимизированной модели и прямая передача на принтер — единый процесс от начала до конца.

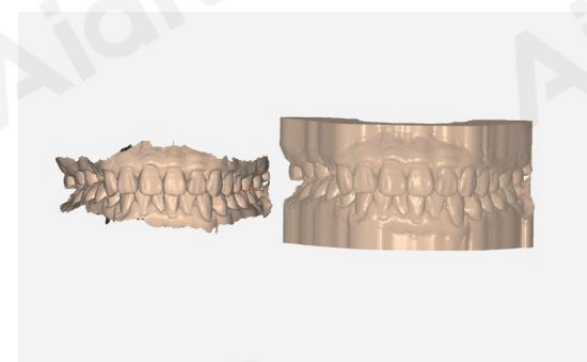

Сканирование + дизайн
(ПО Aidite)

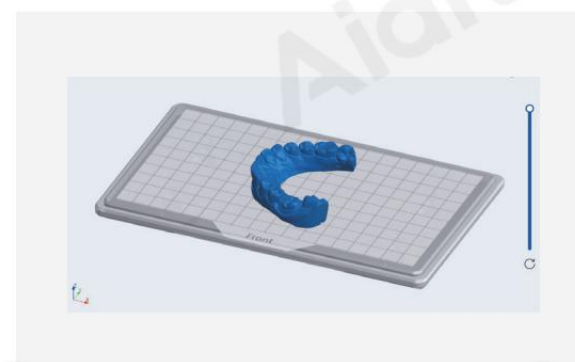

Раскладка слайсов
(ПО для слайсинга)



Печать завершена




Печать модели

Точность без усилий в сложных случаях имплантации

Исключительная точность и большая глубина резкости: Rapid 5 легко получает внутриворотные данные при полной адентии и протяжённых конструкциях, заметно сокращая время сканирования и повышая комфорт пациента и клинический результат.




Интраоральный скан: имплантация All-on-X

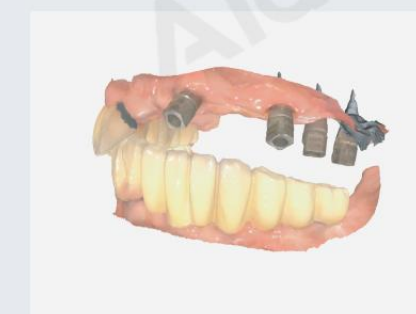

Интраоральный скан: протяжённая конструкция

Клинические инструменты · Умный процесс

ИИ и клинические инструменты — новый уровень цифровой стоматологии.

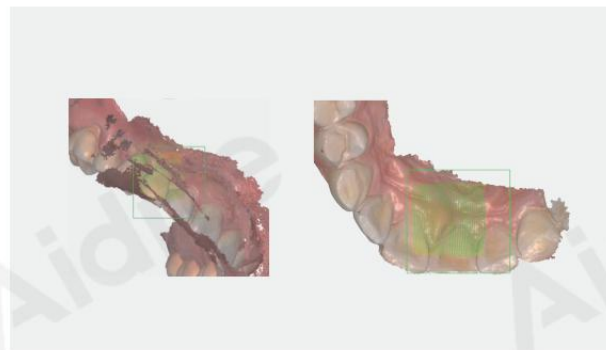


ИИ-сканирование

Автоматически распознаёт и отфильтровывает лишние данные мягких тканей — сканирование быстрее и чище.




Проверка прикуса

Определение окклюзии. Быстрая проверка окклюзионных контактов.

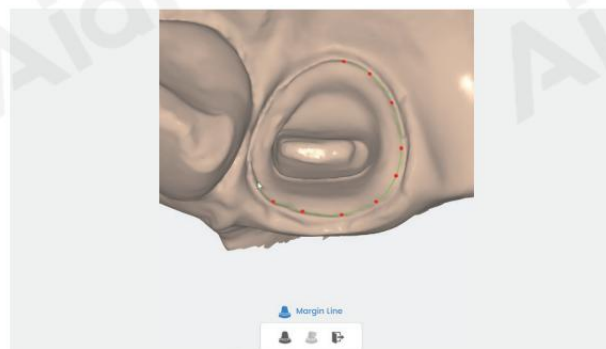

Дизайн десневого края

Точное определение границ препарирования — проще коммуникация с лабораторией, точнее реставрации.

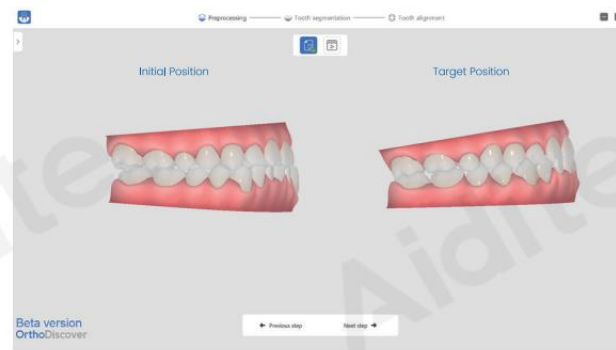


Ортодонтическая симуляция

Точный прогноз перемещения зубов и итогового результата — покажите пациенту его будущую улыбку.



Сопоставление скан-маркеров

Импорт данных скан-маркеров и сопоставление в один клик во время сканирования — выше точность, меньше переделок.

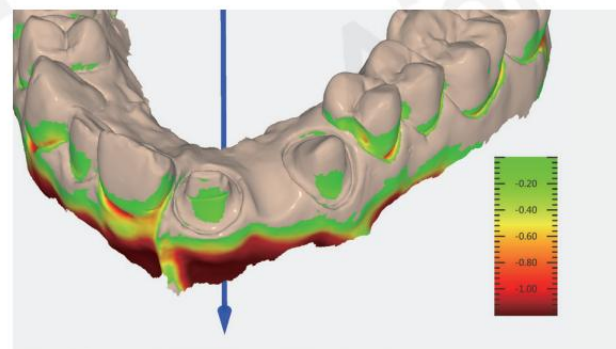

Проверка поднутрений


Визуальная карта поднутрений, оценка препарирования и оптимальный путь введения.

Гибкое применение в любых сценариях

Разные материалы и цвета наглядно различимы — включая металл.



Сканирование металла

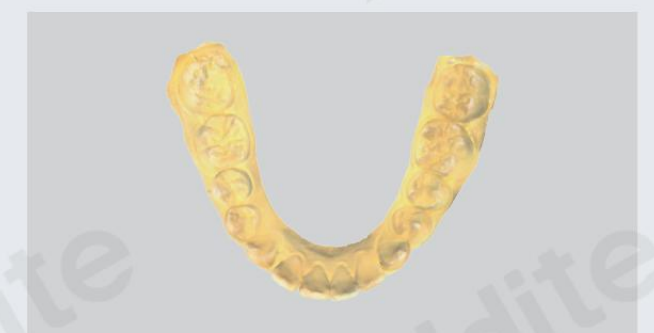

Гипсовая модель



Полимерная модель




Сканирование PEEK

Aidite Cloud



Данные сканирования — в облако в один клик
облачный поиск, дизайн и отслеживание заказов

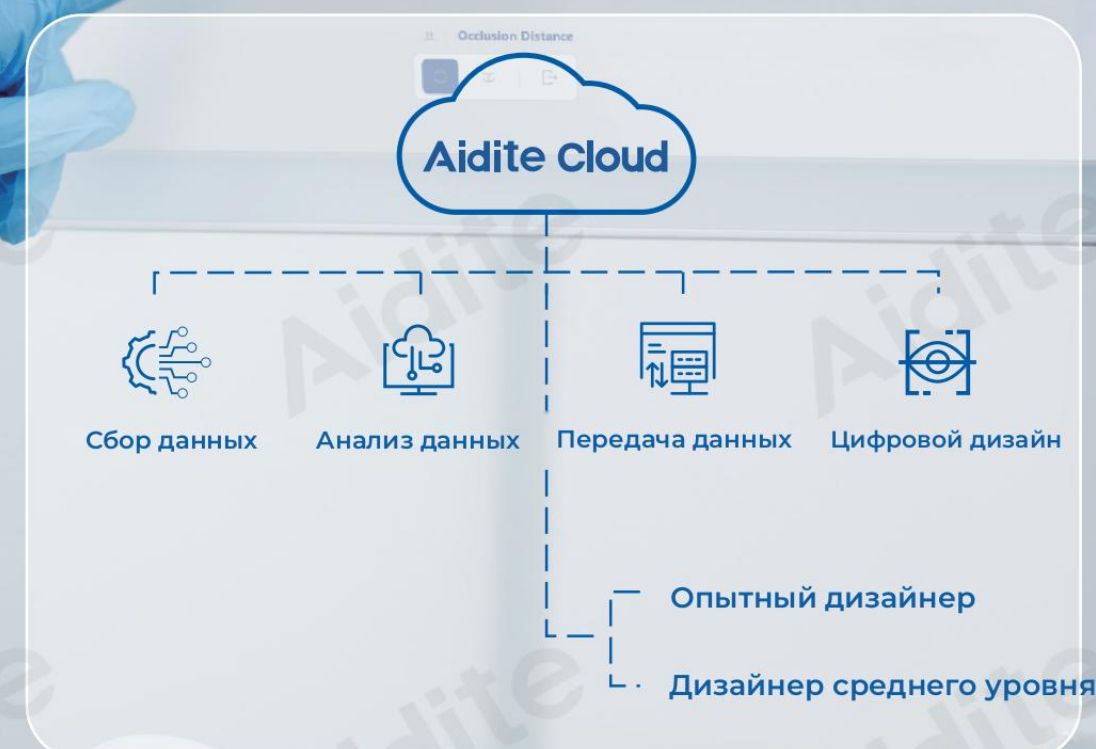

Aidite Cloud

Эффективно и удобно: операции в один клик — экономия времени и сил, рост эффективности работы.

Точное отслеживание: статус заказа в реальном времени — уверенность на каждом этапе.

Мгновенная обработка: данные интраорального сканирования плюс облачный дизайн и обработка у кресла — установить реставрацию просто.



- Отслеживание случаев
- Управление устройствами
- Обмен и хранение данных сканирования

Dashboard

My Account

Case

Cloud Storage

Partner

Patient/File Name

Start Date

End Date

Search

Reset

Delete

Download

	Patient	File Name	Type	Teeth	Upload Date	Operation			
☐	dolt	dolt_202505270958.zip	Restoration	16	2025-05-27 09:58:37	Download	Delete	Rename	view model
☐	test	1253110c_20241021111030....	Restoration	12	2024-10-21 11:39:25	Download	Delete	Rename	view model
☐	test	1253110c_20241021111030....	Restoration	12	2024-10-21 11:37:35	Download	Delete	Rename	view model
☐	test	f0687149_20241010163907.zip	Restoration	34,22	2024-10-11 08:19:07	Download	Delete	Rename	view model
☐	hy	9c4dfc7f_20241008100120.zip	Implant	21,23,12,35,32,34,24,16,14,3...	2024-10-08 10:22:01	Download	Delete	Rename	view model
☐	hy	9c4dfc7f_20241008100120.zip	Implant	21,23,12,35,32,34,24,16,14,3...	2024-10-08 10:17:01	Download	Delete	Rename	view model
☐	hy	9c4dfc7f_20241008100120.zip	Implant	21,23,12,35,32,34,24,16,14,3...	2024-10-08 10:11:04	Download	Delete	Rename	view model

Dashboard

My Account

Case

Cloud Storage

Partner

All

Pending

Accepted

Under design

Producing

Shipped

Completed

Rejected

Canceled

Order No/ Patient

Case Types

Upload start...

Upload end...

Search

Reset

Order No	Receiver	Patient	Type	Due Date	Upload Date	Status	Details	Remarks	Operation
20250527691153	Dsjlov	dolt	Restoration		2025-05-27 09:54:28	Canceled			Delete
241019595226	xingchen lab	test	Restoration		2024-10-19 08:49:08	Shipped			Completed
241017213527	Blaze	dolt	Restoration		2024-10-17 11:14:57	Accepted			
241011194448	Blaze	dolt	Restoration		2024-10-11 13:59:12	Pending			Cancel
241011209133	Blaze	dolt	Restoration		2024-10-11 13:53:17	Pending			Cancel
241011858473	Blaze	dolt	Restoration		2024-10-11 13:44:00	Shipped			Completed
241008705868	Loong	dolt2	Restoration		2024-10-08 08:34:07	Pending			Cancel
241007354526	Blaze	dolt	Restoration		2024-10-07 15:47:03	Accepted			
241007206927	xingchen lab	dolt	Restoration		2024-10-07 10:02:23	Completed			
241007983745	xingchen lab	dolt	Restoration		2024-10-07 09:50:33	Completed			

<

1

>

Total 10

10/page

Связь клиник и зуботехнических лабораторий




Обмен данными — по QR-коду

Передача данных — в один клик

- Отсканируйте QR-код, чтобы скачать случаи.
- Отправляйте случаи в облако одной кнопкой.




Передача данных — это просто

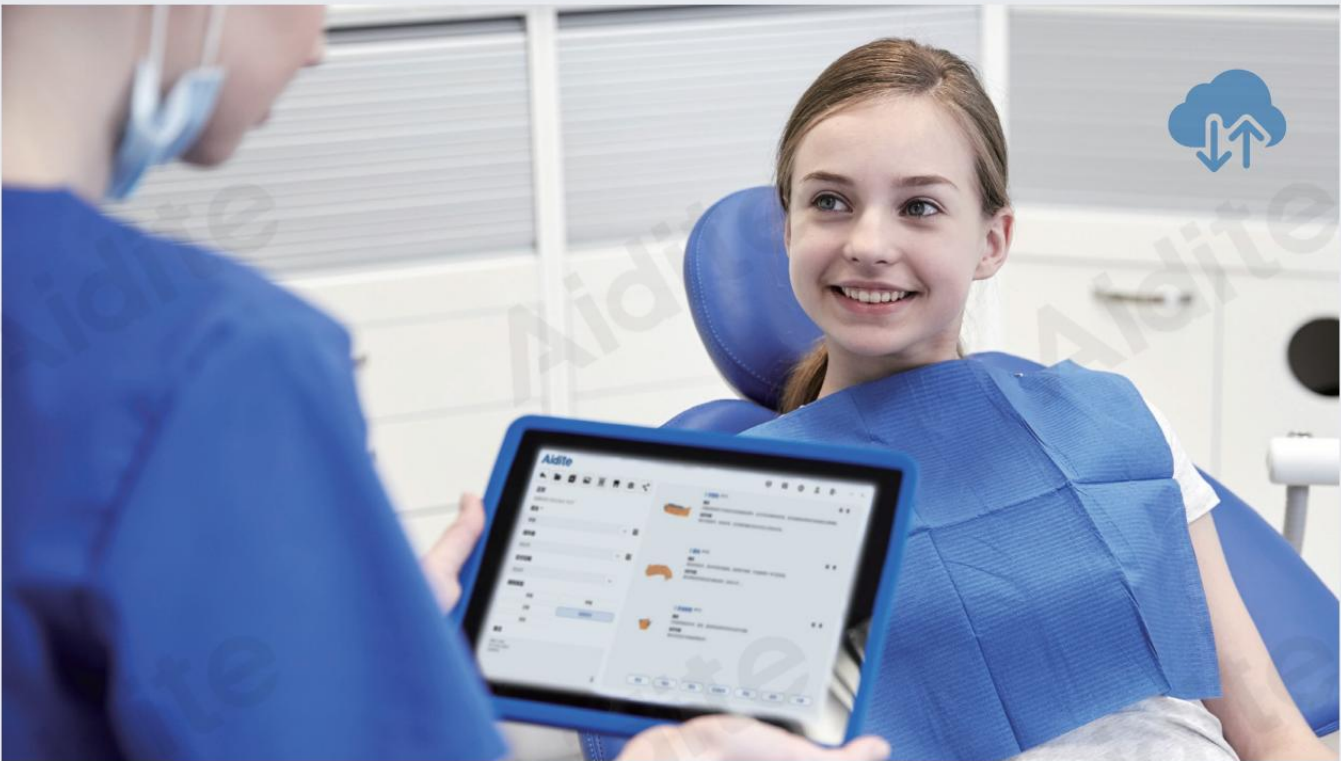

Интеллектуальный отчёт об осмотре полости рта

- Автоматически выявляет потенциальные поражения полости рта и мгновенно формирует отчёт для ранней диагностики
- Отчётом легко поделиться по QR-коду или ссылке

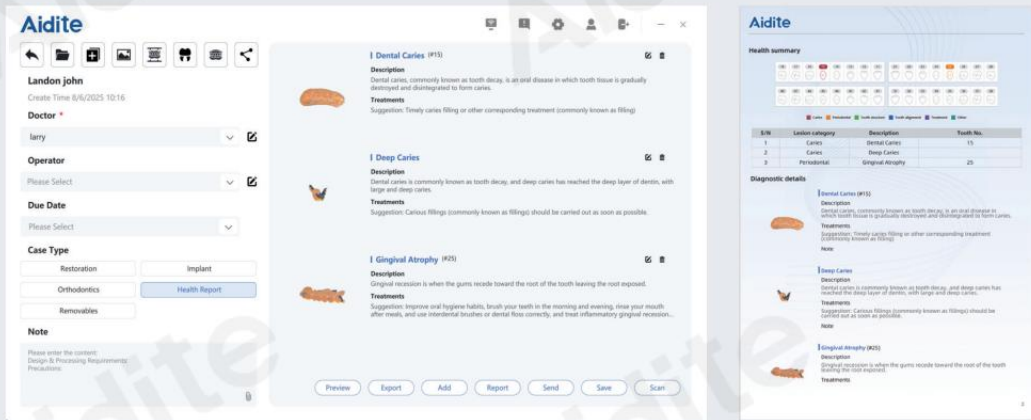

Подробные характеристики

Параметр	Значение
Технология съёмки	Структурированный свет
Габариты	246 мм × 40 мм × 34 мм
Вес	162 г
Глубина резкости	25 мм
Точность	Коронка: ≤10 мкм Полная дуга: ≤20 мкм
Скорость сканирования	Одна дуга: 25 с Полная дуга: 60 с
Управление	Две кнопки + сенсорное управление движением
Рабочая температура	≤48°C
Форматы данных	STL, PLY, OBJ
Передача данных	Aidite Cloud
Калибровка	Регулярная калибровка не требуется
Насадки	3 × стандартные / 1 × Mini выдерживают ≥100 циклов автоклавирования (134°C, 6 мин)

Рекомендуемые системные требования

Процессор: Intel Core i7-9700 или выше
Память: 16 ГБ ОЗУ или больше
Накопитель: SSD 256 ГБ или больше
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 8 ГБ или выше
ОС: Windows 10 64-бит или новее
Экран: разрешение 1920 × 1080 или выше

Поддерживаемые языки

Английский, китайский (упрощ. и традиц.), немецкий, французский, польский, испанский, итальянский, русский, чешский, греческий, португальский, турецкий, венгерский, корейский, японский

Функции ПО

ИИ-сканирование, TrueColor, режим металла, сканирование оттисков, выравнивание и сопоставление осей, дизайн линии края и основания модели, отчёт о здоровье, облачный обмен случаями, ортодонтическая симуляция