


Финальные фрезы

- Фреза для формирования финального ложа под имплантат
- Обязательно к применению в твердой кости
- Используйте с учетом диаметра имплантата
- Рекомендованная скорость вращения:
800-1.000 об/мин.

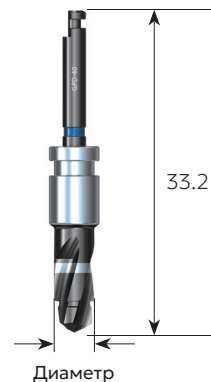

Имплантат	 F3.6	 F4.0	 F4.5	 F5.0	 F5.5	 F6.0
Диаметр	Ø3.6	Ø4.1	Ø4.6	Ø5.1	Ø5.6	Ø6.1
Арт. №	GPD-35	GPD-40	GPD-45	GPD-50	GPD-55	GPD-60
Втулка	MSV-52				MSV-65	
Набор	WAGA				WAGA Plus	